

Zestaw **SMART MICRO plus+** zawiera:

- Skaner płytek obrazowych **SMART MICRO plus+** i oprogramowanie **Nical Image Plus Vet**.
- Wysokiej rozdzielczości płytki obrazowe wielokrotnego użytku w rozmiarach: #1 (2 szt.), #2 (2 szt.), #3 (1 szt.) oraz #4 (1 szt.).
- Osłony ochronne na światło w rozmiarach: #1 (20 szt.), #2 (20 szt.), #3 (10 szt.) oraz #4 (10 szt.).
- Woreczki higieniczne w rozmiarach: #1 (50 szt.), #2 (50 szt.), #3 (25 szt.) oraz #4 (25 szt.).
- Plastikowy ochroniacz przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- 2-letnia gwarancja z technicznym wsparciem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozdzielczość	22 lp/mm - 16 bits
Redukcja szumów	SNR 65 ≥ dB
Czas skanowania HD	2 opcje prędkości skanowania
Typ połączenia	USB 2.0 / USB 3.0 / Ethernet
Rozmiar płytki	0 - 1 - 2 - 3 - 4C - 4
Oprogramowanie	zgodne z Twain / DICOM 3.0
Waga	4.4 kg
Wymiary	250x190x283mm

EN 60601-1-2
EN 60601-1

EMC
Safety



REV. 2 — 10 /2023

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

VETERINARY
medif

al. Jana Pawła II 25, Life Building,
00-854 Warszawa

+48 22 338 70 08
bok@medif.com

[www.medif.com]



NICAL 
radiology digital image systems

SMART MICRO plus+

Wysoka rozdzielczość dla doskonałej jakości





Wygodne kompaktowe i elastyczne

Płytki fosforowe są **łatwe w obsłudze** i mogą być **używane tysiące razy**. Co więcej, bezprzewodowe płytki fosforowe umożliwiają **precyzyjne pozycjonowanie**.

Możesz wybrać używanie naszych osłon ochronnych na światło, aby zapobiec utracie danych w przypadku ekspozycji na światło, lub z nich zrezygnować, aby uzyskać jeszcze szybsze odczyty w ciemniejszym pomieszczeniu.

Wybierz **jedną z dwóch prędkości**. Wysoką rozdzielczość, aby zeskanować w **4-9 sekund** lub standardową rozdzielczość, aby zeskanować jeszcze szybciej w **2-5 sekund**.

Dzięki kompaktowym rozmiarom, **SMART MICRO plus+** można łatwo zintegrować z każdą aktywną strefą w Twojej praktyce weterynaryjnej.

Intuicyjne oprogramowanie

✓ **Nical Image Plus Vet** to **łatwe w obsłudze** i praktyczne rozwiązanie, które jest dołączane **bez dodatkowych opłat**.

✓ **Automatyczne ustawienia** zapewniają diagnostyczny obraz nawet w przypadku nadmiernej lub niewystarczającej ekspozycji.

✓ Oprogramowanie oferuje wiele praktycznych funkcji przedstawionych **w przyjaznym dla użytkownika interfejsie**, co czyni system atrakcyjnym dla każdego użytkownika.

✓ Wstępne ustawienia przetwarzania obrazu, w tym **krzywe gamma i filtry dwuwymiarowe**.

✓ Obrazy mogą być wyświetlane w gabinetach konsultacyjnych **na dziesięciu komputerach**, dzięki oprogramowaniu sieciowemu.

POPRAWA WYDAJNOŚCI

Optymalny przepływ pracy połączony z szybkim i wysokiej jakości obrazem, aby wykorzystać pełny potencjał Twojej praktyki.


✓ **Doskonała jakość obrazu**
Dzięki **opatentowanemu przewodnikowi światła, SMART MICRO plus+** zapewnia doskonałą rozdzielczość przestrzenną i kontrastową.

✓ **Certyfikowana jakość**
Precyzyjnie wykonany we Włoszech, **SMART MICRO plus+** jest objęty **dwuletnią gwarancją i wsparciem technicznym**.

✓ **Optymalny przepływ pracy**
Obrazy automatycznie wyświetlają się na ekranie komputera, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Płytki są automatycznie wymazywane po każdym skanowaniu i gotowe do ponownego użycia.

✓ **Wbudowana pamięć**
Wewnętrzna pamięć urządzenia **eliminuje możliwość utraty obrazu** w przypadku awarii sieci lub nieoczekiwanego wyłączenia komputera.

✓ **Wyjątkowa użyteczność**
W pełni **automatyczne wkładanie, odczyt i wyświetlanie płytek**. Dzięki **SMART MICRO plus+** będziesz w stanie **zminimalizować błędy** i pracować bardziej efektywnie niż kiedykolwiek wcześniej.

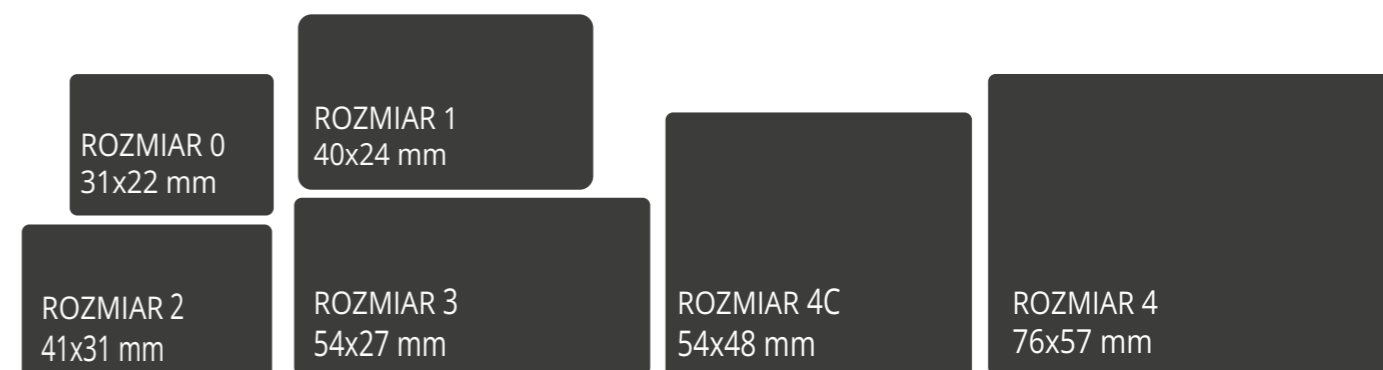

SMART MICRO plus+ asortyment płytek fosforowych